

Thermo Scientific Versa Rx 高精度
高速检重秤，质量卓越、满足最高性能
标准

Thermo Scientific Versa Rx 制药检重秤

用于制药工业的高速、高精度检重秤



制药过程控制对设备性能、卫生条件及可靠性提出了最高要求。Thermo Scientific Versa Rx 制药检重秤，由此成为适用于制药应用的最佳解决方案。对制药生产过程中的包装内的产品进行出色的质量控制，满足最严格的产品质量控制要求。

Versa Rx 制药检重秤采用单相无刷电机驱动，可轻松检测高速生产线上的产品，精确度无与伦比。能够从2克到500克的产品进行称重，最高处理速度可达600件/分钟（具体处理速度取决于包装尺寸）。

特性 & 优势

- 操作方便
- 灵活性—可称量检测各种包装的产品，包括小袋、泡罩盒装、纸盒、塑料瓶、玻璃瓶、袋装和小喷雾剂
- 容易维护
- 卫生型设计
- 高精度，优于 $\pm 30\text{mg}$ （3西格玛）
- 最高速度可达600件/分钟
- 符合21 CFR第11部分的要求
- 喷码及确认/ Data Matrix（选件）
- 故障-安全剔除机械装置和剔除验证功能



Versa Rx 制药检重秤确保包装内部产品的重量准确。Versa Rx 制药检重秤的精确度极高，优于 ± 30 毫克（3西格玛），能够检测盒子内是否有法律要求的说明书

（重量极轻）。Versa Rx 制药检重秤符合《药品生产质量管理规范》（GMP）标准，是制药业的一流品质控制设备。

Versa Rx 制药检重秤维护要求低，其独有的封闭式设计和精密性可提高不稳定物品的测量精确度。Versa Rx 制药检重秤还可选配针对制药特殊需求的可选功能。


Versa Rx 制药检重秤精确度极高、检测重量速度迅速，有效保护您的品牌形象，同时提高产品检测效率。

Thermo Scientific Versa Rx 制药检重秤

技术规格

包装速率	采用松带技术可达600件/分钟, 紧带技术可达400件/分钟
精度	±30 mg (3 sigma)
操作温度	-10°C to +50°C (-14°F to +122°F)
相对湿度	20% to 50% 无冷凝
称量范围	松带: 2 g to 300 g (0.07 oz to 10.57 oz) 紧带: 10 g to 600 g (0.35 oz to 17.62 oz)
电源	115/230 VAC, 5D/60 Hz, 15 amps
压缩空气	5.5 bar (80 psi) 600 kPa
生产线高度	625 mm (24.6 in) to 1000 mm (39.4 in)

Thermo Scientific Versa Rx 制药检重秤外形尺寸

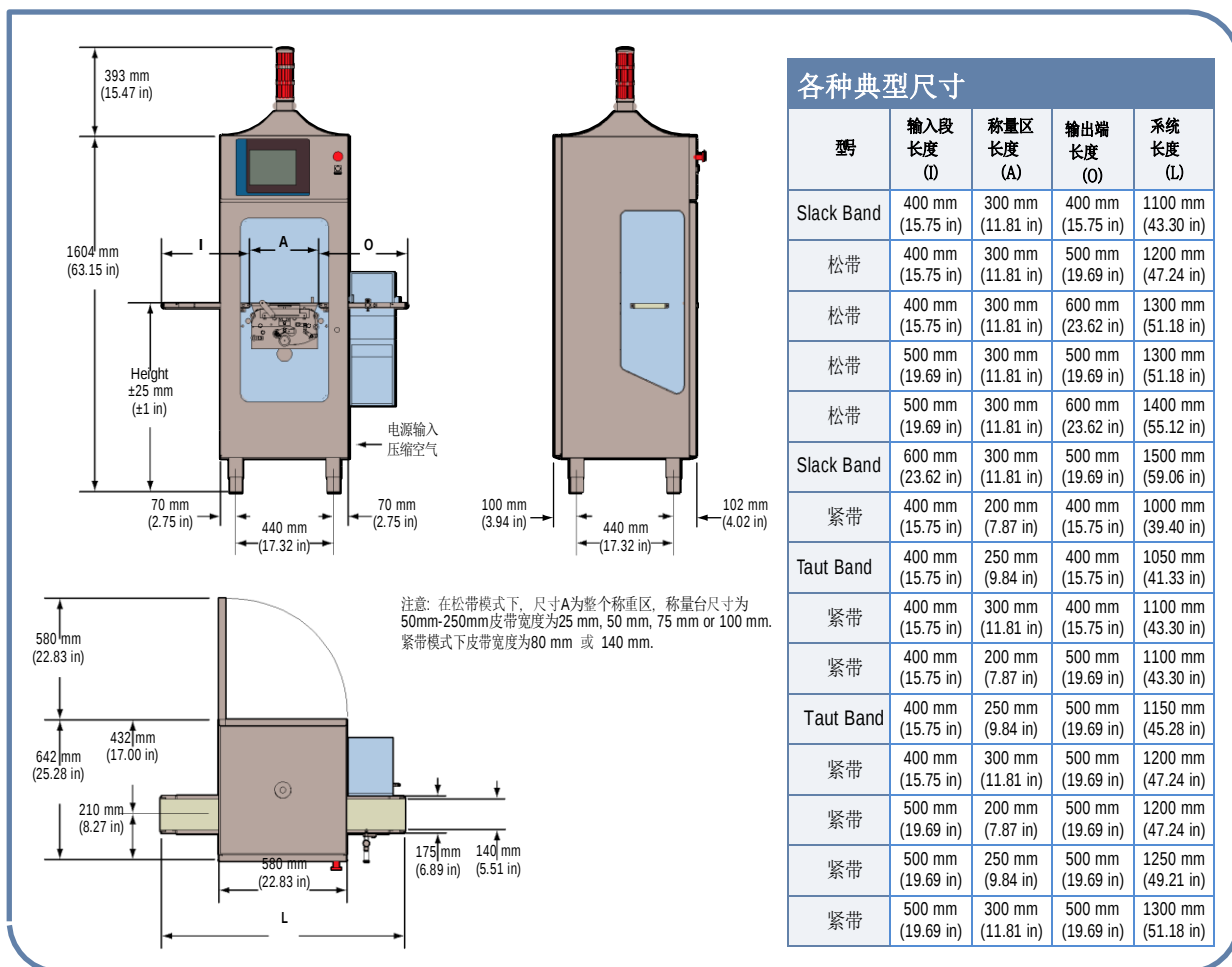

© 2011 赛默飞世尔科技。保留所有权利。在不同的运行条件下结果可能有所不同。规格、术语和定价如有变更恕不另行通知。并非所有产品可用于所有的国家。详情请咨询你所在地的销售代理人。

石家庄德亚科技有限公司

河北省石家庄市东岗路 46 号天海誉天下 7 座 1 单元 2302 室

电话: 0311 85855525

Cell: 13933873195, 13513389928

Email: horace_guo@163.com

